

*A rendszeres karbantartás
kulcsfontosságú a tökéletes
működés megőrzéséhez!*

**Vállaljuk autoklávok,
laboratóriumi nyomástartó
edények szervizelését, javítását.**

A H-ION Kft. csapata nagy tapasztalattal rendelkezik
nyomástartó edények és áramlásos kémiai eszközök
tervezése, gyártása, szervizelése, javítása terén.


- ✓ Autoklávok
- ✓ Nyomástartó edények

- állapotfelmérés
- karbantartás
- javítás

- ✓ Folyamatos karbantartás

**Bízza ránk nyomástartó edényeinek karbantartását és mi garantáljuk
Önöknek a folyamatos és biztonságos munkavégzést.**

Kössön cégünkkel karbantartási szerződést, hogy mindezt
a legjobb árakon és határidőkkel biztosíthassuk.

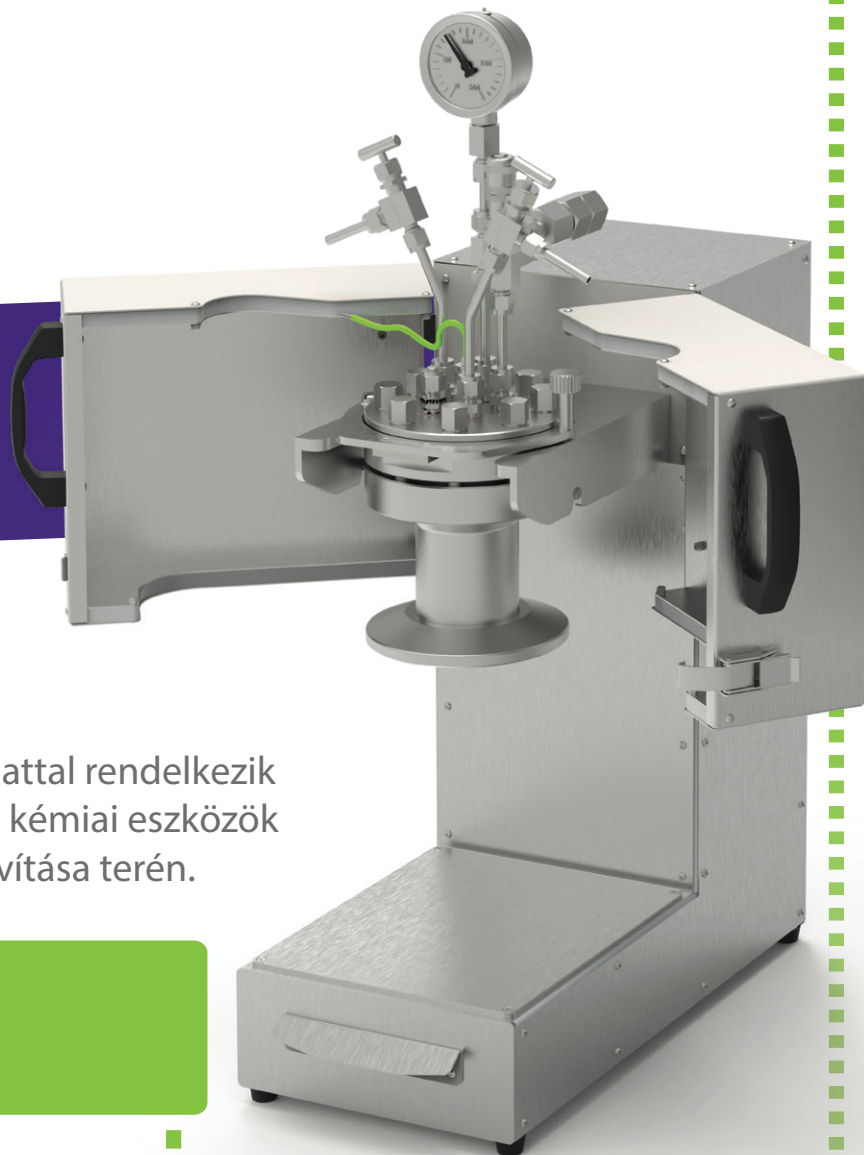


**Vállaljuk egyedi autoklávok,
nyomástartó edények
tervezését, méretezését,
gyártását is.**

Laboratóriumi nyomástartó edényeink széles típusválasztékban elérhetők. Tökéletesen alkalmasak katalizátor kutatáshoz és hidrogénezéshez is.

- Max. üzemi térfogat: **1000 ml**
- Max. üzemi nyomás: **100 bar**
- Max. üzemi hőmérséklet: **200 °C**

Előnyök

- ✓ Alacsony szervizigény
- ✓ Egyszerű karbantartás
- ✓ Hosszú élettartam
- ✓ Nagy üzembiztonság az alkalmazott anyagoknak köszönhetően

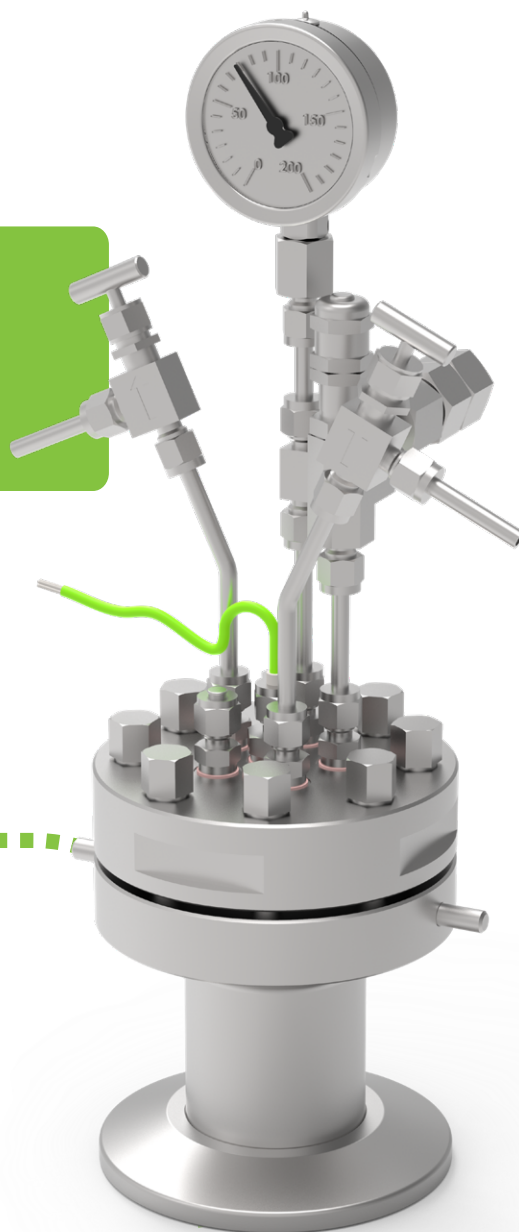

Alapfelszereltség

- ✓ Hőelemzsák
- ✓ Túlnyomás leeresztő szelep
- ✓ Hasadótárcsa
- ✓ Manométer
- ✓ Gáz bevezető és leeresztő szelep

Opcionális kiegészítők

- ✓ Külső köpenyfűtés
- ✓ Katalizátor kosár
- ✓ Felső keverés
- ✓ Autokláv állvány
- ✓ Mintatartó betét
- ✓ Mintavételi szelep



Honlapunkon megtalálja áramlások kémiai készülékeinket is: gázadagoló, áramlások kémiai reaktor, syringe pumpa, folyamatos szűrő berendezés